

# AmbuMan® Basic



## Die wichtigsten Vorteile

- Kosteneffizientes BLS-Algorithmus-Trainingsgerät
- Robust und ausdauernd
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Visualisierung der richtigen Kompressionstiefe
- Ambu Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmung
- Beutel-Masken Beatmung
- Platzierung eines Guedeltubus (bei Verwendung der Guedel Gesichtsmaske)
- Realistischer Atemwegswiderstand
- Visualisierung des richtigen Beatmungsvolumens
- Sichtbares Heben und Senken des Brustkorbs
- Hörbares Ausatmen durch Mund und Nase
- Anatomisch korrekter, geschlossener Torso
- Einfaches AED Training durch realistische Platzierung der Defibrillationselektroden
- Praktisches 4er Set für optimales Gruppentraining

## AmbuMan Basic

Der AmbuMan Basic ist ein kosteneffizientes Trainingsgerät welches auf die Bedürfnisse des BLS-Algorithmus-Training abgestimmt ist.

Dank seines geschlossenen Torsos kann die Nutzung eines Trainings-AEDs und die Platzierung der Defibrillationselektroden optimal trainiert werden.

Der AmbuMan Basic ermöglicht das optimale Training der Thoraxkompression in Kombination mit einer realistischen Beatmung. Das anwenderfreundliche Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen und sorgt für realistische Atemwegswiderstände und eine Expiration durch Mund und Nase. Die richtige Kompressionstiefe und das optimale Beatmungsvolumen kann der Übende über eine Feedbackanzeige kontrollieren.

Das AmbuMan Basic 4er Set eignet sich besonders für das Gruppentraining.

### Realistische Beatmung

Die Beatmung ist nur bei korrekter Kopfüberstreckung möglich und erzeugt einen realistischen Atemwiderstand. Zudem ist das Ausatmen durch Mund und Nase hörbar, sowie das Heben und Senken des Brustkorbs sichtbar.

### Kosteneffizient und zuverlässig

Der AmbuMan Basic ist der beste Partner für ein kosteneffizientes und zuverlässiges BLS-Training.

### BLS-Gruppentraining

Der AmbuMan Basic ist optimal auf die Bedürfnisse des BLS-Gruppentrainings abgestimmt. Er lässt sich einzeln oder auch als 4er Set einfach transportieren und schnell für das Training aufbauen. Bewährte Ambu Qualität in einem kompakten Format.

## Technische Daten

Gewicht Torso	6 kg
Länge	70 cm
Breite	37 cm
Gewicht 4 x Torso mit Tragetasche	30 kg
Max. Beatmungsvolumen	1.200 ml
Max. Kompressionstiefe	7,5 cm



AmbuMan Basic

## Material

Instrumententeil	ABS-Kunststoff
Kopf	Polyvinylchlorid, hart
Brusthaut	Polyvinylchlorid, weich
Gesichtsmaske	Polyvinylchlorid, weich
Kopfbeutel, Einweg	Polyethylen
Trainingsanzug	Polyester
Tragetasche	PVC-beschichtetes Nylon




Ambu Hygienesystem

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
A268 005 000	AmbuMan Basic inkl. Trainingsjacke in einer Tragetasche, 1 Gesichtsmaske und 25 Einweg-Luftbeuteln
A268 006 000	AmbuMan Basic 4er Set inkl. 4 AmbuMan Basic Torsi mit Trainingsjacke in zwei Tragetaschen mit Rollen (für je zwei AmbuMan Basic), 4 Gesichtsmasken und 100 Einweg-Luftbeuteln
<b>Zubehör</b>	
234 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)
234 000 703	Ambu Gesichtsmaske (5 Stück)
234 000 725	Ambu Guedel Gesichtsmaske
268 000 562	Carry bag large AmbuMan Basic Tragetasche mit Rollen für 2 AmbuMan Basic



Anzeige Kompressionstiefe

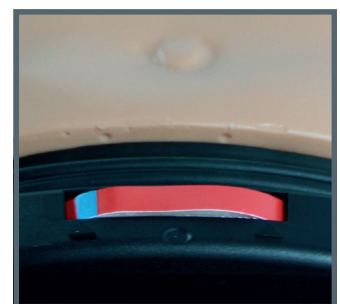

Anzeige Beatmungsvolumen

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
In der Hub 5  
61231 Bad Nauheim  
Tel. 06032 9250-0  
Fax 06032 9250-200  
www.ambu.de



AmbuMan Basic 4er Set  
2 x Tragetasche mit Rollen  
(für je zwei AmbuMan Basic)



Tragetasche AmbuMan Basic